

Deutsch/German Elektroden-Kontaktspray

Beschreibung

Elektroden-Kontaktspray für EKG-Applikationssysteme mit Saugelektroden

200 ml  21730701
10 x 200 ml  21730702
2 l  21730705

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Elektroden-Kontaktspray dient zur Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit zwischen Gerät und Körper bei EKG-Aufnahmen mit wiederverwendbaren Saugelektroden.

Das Elektroden-Kontaktspray ist für die Verwendung bei erwachsenen Patienten und bei Kindern vorgesehen.

Das Elektroden-Kontaktspray ist für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal unter unmittelbarer Aufsicht eines Arztes vorgesehen.

Zweck dieses Dokuments

- Dieses Dokument enthält Anweisungen zur Verwendung des Elektroden-Kontaktsprays. Weitere Anweisungen zur Vorbereitung der Haut finden Sie in der Gebrauchsanweisung des Geräts.



Nur zur äußeren Anwendung! Nicht geeignet zum Langzeitgebrauch!

Gebrauchsanweisung

- Bringen Sie eine ausreichende Menge an Spray auf die Haut (nicht auf die Elektroden) auf.
- Spraynebel darf nicht direkt eingeatmet werden.
- Spülen Sie nach dem Gebrauch Sprayreste mit Wasser ab.
- Das Produkt darf nicht mit offenen Wunden in Berührung kommen.
- Das Produkt darf nicht in die Augen gelangen.
- Wenn das Spray in die Augen gelangt ist, gründlich mit Wasser spülen.



/  Siehe Boden der Dose.

Herstellerverantwortung

GE Healthcare betrachtet sich im Hinblick auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und Funktion nur dann verantwortlich, wenn das Kontaktspray gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet wurde.

Geräteklassifikation

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt der Klasse I gemäß 93/42/EWG für Europa.

Hinweise zur CE-Kennzeichnung

Das Produkt trägt die CE-Kennzeichnung, die anzeigt, dass es den aufsichtsbehördlichen Anforderungen der EU-Richtlinie 93/42/EWG für medizinische Geräte entspricht.

Bestellinformationen

Zur Nachbestellung von Kontaktspray wenden Sie sich an Ihren Vertreter von GE Healthcare vor Ort.

GE Healthcare, ein Unternehmen von General Electric, firmiert als GE Medical Systems *Information Technologies* GmbH.

© 2011 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

Nederlands/Dutch Elektrodecontactspray

Beschrijving

Elektrodecontactspray voor ECG-systemen met zuigelektroden.

200 ml  21730701
10 x 200 ml  21730702
2 l  21730705

Beoogd gebruik

De elektrodecontactspray kan worden gebruikt om te zorgen voor goed elektrisch contact tussen apparatuur en het menselijk lichaam bij het maken van een ECG met herbruikbare zuigelektroden.

De elektrodecontactspray is geschikt voor volwassenen en kinderen.

De elektrodecontactspray dient te worden gebruikt door deskundig medisch personeel en onder direct toezicht van een bevoegde zorgverlener.

Doel van document

- Dit document bevat instructies over het gebruik van de elektrodecontactspray. Voor verdere instructies over voorbereiding van de huid kunt u de bedieningshandleiding van de apparatuur raadplegen.



Alleen voor uitwendig gebruik! Niet geschikt voor langdurig gebruik!

Gebruiksaanwijzingen

- Breng de benodigde hoeveelheid spray aan op de huid, niet op de elektroden.
- Vermijd inademing van gassen.
- Verwijder achtergebleven spray na gebruik met water.
- Vermijd contact met open wonden.
- Vermijd contact met de ogen.
- Wanneer er spray in de ogen terechtkomt, spoel dan met veel water.



/  Zie de onderkant van de fles.

Verantwoordelijkheid van de fabrikant

GE Healthcare is uitsluitend verantwoordelijk voor de effecten op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties als de elektrodecontactspray wordt gebruikt volgens de gebruiksaanwijzing.

Apparaatclassificatie

Dit product behoort in Europa tot Klasse I medische apparatuur volgens richtlijn 93/42/EEC.

Informatie over CE-markering

Product is voorzien van een CE-markering. Dit geeft aan dat het voldoet aan de wettelijke voorschriften van de Europese richtlijn 93/42/EEC inzake medische apparatuur.

Informatie over opnieuw bestellen

Neem contact op met uw lokale GE Healthcare-vertegenwoordiger om elektrodecontactspray bij te bestellen.

GE Medical Systems *Information Technologies*, een onderdeel van General Electric Company, dat handelt onder de naam GE Healthcare.

© 2011 General Electric Company – Alle rechten voorbehouden.



GE Medical Systems
Information Technologies, Inc.
8200 West Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223 USA
Tel: +1 414 355 5000
1 800 558 7044 (US Only)
1 800 668 0732 (Canada Only)
Fax: +1 414 355 3790




GE Medical Systems
Information Technologies GmbH
Munzinger Straße 5
79111 Freiburg
GERMANY
Tel: +49 761 4543-0
Fax: +49 761 4543-233

Asia Headquarters

GE (China) Co., Ltd.
No1 Huatuo Road,
Zhangjiang Hi-Tech Park Pudong,
Shanghai, P.R.China 201203
Tel: +86 21 38777888
Fax: +86 21 38777402

通用电气医疗系统信息技术公司
8200 West Tower Avenue
Milwaukee, WI 53223 USA 美国
Tel: +1 414 355 5000
1 800 558 7044 (US Only)
1 800 668 0732 (Canada Only)
Fax: +1 414 355 3790

中国境内售后服务机构:
公司名称:
通用电气医疗系统贸易发展 (上海) 有限公司
地址:
上海市外高桥保税区冰克路 777 号 4# 仓库 B 部位
电话: 800-810-8188

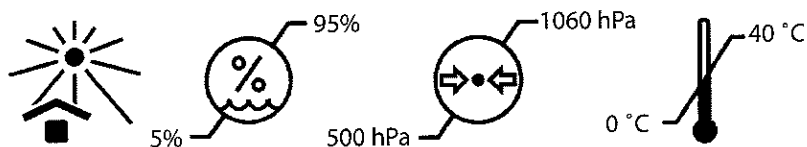

GE Medical Systems *Information Technologies*, a General Electric Company, going to market as GE Healthcare.

www.gehealthcare.com



GE Healthcare

© 2011 General Electric Company—All rights reserved.

2034819-004 C 2011-12-14