

ÜBERRASCHEND KLEIN...
VERBLÜFFEND LEISTUNGSSTARK,
KOMPATIBEL MIT DEN BARD® TRUGUIDE®
BIOPSIENADELN - FÜR VERBESSERTE
EFFIZIENZ UND GENAUIGKEIT



TRUGUIDE® Coaxialnadel

Bestellinformationen

MAGNUM® Biopsiesystem

Bestell-Nr.	VE	PZN*
MG1522	1 Stück	03405080

MAGNUM® Einmalnadeln mit Abstandhalter

Bestell-Nr.	Ø [G]	Ø [mm]	Länge [cm]	Farbcode	VE	PZN*
MN1210	12	2,8	10	Light Blue	10 Stück	03405097
MN1213			13	Green	10 Stück	03405105
MN1216			16	Light Blue	10 Stück	03405128
MN1220			20	Light Blue	10 Stück	03405134
MN1410	14	2,1	10	Green	10 Stück	03405140
MN1413			13	Green	10 Stück	03405163
MN1416			16	Green	10 Stück	03405192
MN1420			20	Green	10 Stück	03405200
MN1610	16	1,6	10	Purple	10 Stück	03405387
MN1613			13	Purple	10 Stück	03405476
MN1616			16	Purple	10 Stück	03405482
MN1620			20	Purple	10 Stück	03405507
MN1810	18	1,2	10	Pink	10 Stück	03405513
MN1813			13	Pink	10 Stück	03405559
MN1816			16	Pink	10 Stück	03405803
MN1820			20	Pink	10 Stück	03405884
MN1825			25	Pink	10 Stück	03405915
MN1830			30	Pink	10 Stück	03405921
MN2010	20	0,95	10	Yellow	10 Stück	03405938
MN2013			13	Yellow	10 Stück	03405944
MN2016			16	Yellow	10 Stück	03405973
MN2020			20	Yellow	10 Stück	03405996

TRUGUIDE® Coaxialnadeln

Bestell-Nr.	Ø [G]	Länge [cm]	Farbcode	VE	PZN*	
C1210B	11	7	Light Blue	5 Stück	03406010	
C1213B		10	Light Blue	5 Stück	03406027	
C1216B		13	Light Blue	5 Stück	03406033	
C1410B	13	7	Green	5 Stück	03406056	
C1413B		10	Green	5 Stück	03406062	
C1416B		13	Green	5 Stück	03406079	
C1610B	15	7	Purple	5 Stück	03406085	
C1613B		10	Purple	5 Stück	03406091	
C1616B		13	Purple	5 Stück	03406116	
C1620B	17	17	Purple	5 Stück	03406145	
C1810B		17	7	Pink	5 Stück	03406139
C1813B			10	Pink	5 Stück	03406151
C1816B			13	Pink	5 Stück	03406168
C1820B	17		Pink	5 Stück	03406174	
C2010B	19	7	Yellow	5 Stück	03406180	
C2013B		10	Yellow	5 Stück	03406197	
C2016B		13	Yellow	5 Stück	03406240	
C2020B		17	Yellow	5 Stück	03406257	

* Die angegebenen Pharmazentralnummern sind speziell nur für Deutschland gültig!

VOM MARKTFÜHRER
IN DER STANZBIOPSIE



EIN NEUES, STÄRKERES
INSTRUMENT

AUSTRIA Bard Medica S.A., MGC-Top Nr. D36, 3.0G Ebene, Modecenterstraße 22, 1030 Wien, Austria, Tel: +43-1-49-49-130, Fax: +43-1-49-49-130-30, www.bard.at
GERMANY C. R. Bard GmbH, Wachhausstraße 6, 76227 Karlsruhe, Germany, Tel: +49-721-9445-124, Fax: +49-721-9445-100, www.bard.de
SWITZERLAND Bard Medica S.A., Seestrasse 64, 8942 Oberrieden/Zürich, Switzerland, Tel: +41-44-722-53-60, Fax: +41-44-722-53-70, www.crbard.ch

Bitte ziehen Sie die Produktkennzeichnung und -beileger zu Rate, um sich über Indikationen, Kontraindikationen, Risiken, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und die richtige Handhabung zu informieren.

Bard, Magnum und TruGuide sind Marken und/oder eingetragene Marken der C. R. Bard, Inc.
Copyright © 2015 C. R. Bard, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BRO0130-D (04/2015) DACH

BARD® MAGNUM®

WIEDERVERWENDBARES STANZBIOPSIESYSTEM

MINIMALE GRÖSSE. MAXIMALE KRAFT.




DAS EINZIGE MEHRWEGSYSTEM MIT EINHAND-SPANNVORRICHTUNG UND ZWEI WÄHLBAREN EINDRINGTIEFEN

- Funktionelles Gerätedesign bietet Komfort und Kontrolle durch Einhand-Spannvorrichtung.
- Eindringtiefen von 15 mm oder 22 mm können gewählt werden, um die gewünschten Ergebnisse in einer Vielzahl von Anwendungen zu erreichen.

MAXIMALE KRAFT BEI MINIMALER GRÖSSE - UM EINE VIELZAHL AN ANWENDUNGEN EINFACH UND EFFEKTIV ZU ERFÜLLEN

- Das Design des MAGNUM® Gerätes und seine Vielseitigkeit machen es zur idealen Wahl für eine effektive Biopsie bei einer Reihe von anatomischen Stellen, darunter Brust-, Prostata-, Lunge-, Niere und Leber.
- Eine große Bandbreite an Nadellängen und Durchmessern entsprechen nahezu allen Verfahrensanforderungen.
- Eine Hochgeschwindigkeitsauslösung und ein präzises Nadeldesign stellen dauerhaft exzellente Proben sicher.
- Das MAGNUM® Gerät ist kompakt, einfach zu bedienen, komfortabel in der Handhabung und effektiv bei der Bereitstellung wiederholter qualitativer Ergebnisse.

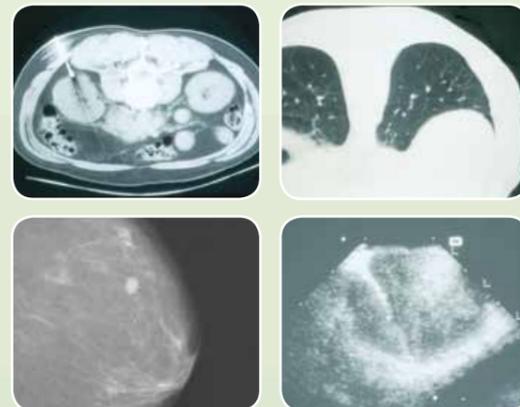

KRAFT = LEISTUNG. KEIN WIEDERVER- WENDBARES SYSTEM IST STÄRKER

- Das kraftvolle Feder-System setzt eine Geschwindigkeit frei, die hoch genug ist, um dauerhaft exzellente Proben zu gewährleisten.
- Die einzigartige Kraft des MAGNUM® Gerätes ermöglicht es dem Anwender, schwere Läsionen mit minimaler Gewebeverlagerung genau zu durchdringen.




JETZT VOM MARKTFÜHRER IN DER STANZBIOPSIE - DAS KLEINSTE WIEDER- VERWENDBARE STANZBIOPSIESYSTEM

- Das leichte und ergonomische Design des MAGNUM® Gerätes trägt zur Kontrolle und einfachen Handhabung bei der Biopsie bei.
- Eine Gerätelänge von 12 cm (ca. 4 1/2") ermöglicht dem Anwender des MAGNUM® Biopsiesystems eine bequeme und einfache Handhabung.

FUNKTIONEN FÜR GESTEIGERTE LEISTUNG UND VIELSEITIGKEIT

- Die MAGNUM® Nadel ist ein Einmalartikel. Ihre Schärfe und große Probenkerbe produzieren saubere Biopsien und nehmen die Gewebeproben sicher auf.
- Einzigartige Distanzstücke ermöglichen eine leichte stereotaktische oder CT-Nadelpositionierung und können leicht entfernt werden, nachdem die Nadel im Gerät platziert wurde.

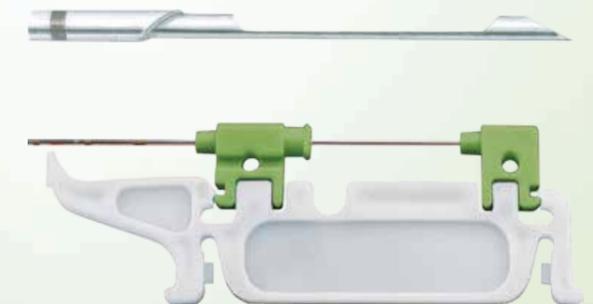

EINE WEITERE INNOVATION IN DER BIOPSIE